

MHP - Handelsgesellschaft Deutschland mbH

🌐 www.mhp-gmbh.com

✉ info@mhp-gmbh.com



Indice

1) Introduzione

- 1.1 Basi normative e standard
- 1.2 Marcatura
- 1.3 Standard fondamentali importanti

2) Specifiche tecniche delle materie prime

3) Segni generali

- 3.1 Numero LOTTO e Tracciabilità (UDI-DI)

4) Istruzioni generali per l'uso (strumenti USA e getta)

5) Pinzetta

- 5.1 Pinzette anatomicamente dritte, standard
- 5.2 Pinzette per denti chirurgici 1x2, standard
- 5.3 Pinzette per denti chirurgici 1x2, standard secondo Adson
- 5.4 Pinzette anatomicamente dritte, standard secondo Adson
- 5.5 Pinzette scheggiate secondo Feilchenfeld, standard
- 5.6 Pinzette DeBakey anatomicamente dritte, standard
- 5.7 Pinzette per denti chirurgici 1x2, standard, secondo Semken
- 5.8 Pinzette Jansen, baionetta, anatomiche, curve

6) Tosare

- 6.1 Forbici chirurgiche
- 6.2 Forbici di Iris
- 6.3 Forbici bendate Lister

7) Portaaghi

- 7.1 Portaaghi Mayo Hegar

8) Clamps & Vocals

- 8.1 Pinza arteriosa secondo Rochester Pean
- 8.2 Pinze per cereali secondo Pean Murphy

9) Curette chirurgiche

- 9.1 Combinazione Volkmann Curette

10) Cura delle ferite

- 10.1 Rimuovente

11) Ulteriori informazioni



1) Introduzione

Questa scheda tecnica contiene tutte le informazioni rilevanti sugli strumenti chirurgici e ne garantisce la conformità agli ultimi standard e normativi internazionali ed europei. L'obiettivo è garantire i più alti standard di qualità e sicurezza per pazienti e utenti, come richiesto dal Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici (MDR) e dalla marcatura CE.

1.1 Basi normative e standard MDR (UE)

2017/745

- Il Regolamento sui Dispositivi Medici stabilisce requisiti vincolanti per la sicurezza, le prestazioni, la gestione del rischio e la valutazione clinica dei dispositivi medici.
- **Requisiti importanti secondo la MDR:**
 - Conformità ai requisiti di base di sicurezza e prestazioni (Allegato I).
 - Preparazione della documentazione tecnica in conformità con gli Annessi II e III.
 - Gestione del rischio in conformità con DIN EN ISO 14971:2022.
 - Valutazione clinica in conformità con l'Allegato XIV.
 - Prova di tracciabilità tramite l'**UDI (Identificatore Univoco del Dispositivo)**.
- Questo regolamento sostituisce la precedente Direttiva 93/42/CEE ed è vincolante in tutti gli Stati membri dell'UE.

1.2 Marcatura

- La marcatura CE indica che il prodotto soddisfa i requisiti del MDR ed è approvato per il mercato europeo.
- Condizioni:
 - Svolgere una procedura di valutazione della conformità (spesso di Classe I o IIa per strumenti chirurgici).
 - Prova di conformità a tutti gli standard e requisiti rilevanti da parte di un ente notificato (se necessario).

1.3 Standard fondamentali importanti

DIN EN ISO 13485:2016

- Sistemi di gestione della qualità per lo sviluppo e la produzione di dispositivi medici.

Scopo di questa scheda tecnica

Questa scheda tecnica funge da riferimento completo per l'uso sicuro e la lavorazione degli strumenti chirurgici.

Offre:

- **Specifiche tecniche:** Descrizione del materiale, del progetto e delle proprietà meccaniche.
- **Conformità** normativa: Dimostrare la conformità a tutti i requisiti pertinenti MDR e CE.
- **Tracciabilità:** Informazioni sull'etichettatura dei prodotti, inclusa documentazione UDI e CE.
- **Informazioni sulla sicurezza:** Tutti gli strumenti elencati qui sono destinati al tuo USO SINGOLO (USA GETTA) e non possono essere riutilizzati.

2) Specifiche tecniche delle materie prime

AISI 410 Acciaio

Inossidabile

Composizione:

AISI 410 è un acciaio inossidabile martensitico con la seguente composizione

tipica:

- **Carbonio (C):** massimo 0,15%
- **Cromo (Cr):** 11,5% – 13,5%
- **Mangan (Mn):** Massimo 1%
- **Silizio (Si):** Max. 1 %
- **Fosforo (P):** Massimo 0,04%
- **Zolfo (S):** max. 0,03%
- **Ferro (Fe):** Stock residuo

Caratteristiche:

- **Durezza:** Alta; durezza e resistenza possono essere migliorate con il trattamento termico.
- **Resistenza alla corrosione:** Moderata.
- **Magnetic:** Sì.

Applicazioni tipiche:

Comunemente usata negli strumenti chirurgici.

AISI 420 Acciaio

Inossidabile

Composizione:

L'AISI 420 è anch'esso un acciaio inossidabile martensitico con la seguente composizione tipica:

- **Carbonio (C):** 0,15% – 0,40%
- **Cromo (Cr):** 12% – 14%
- **Mangan (Mn):** Massimo 1%
- **Silizium (Si):** Max. 1 %
- **Fosforo (P):** Massimo 0,04%
- **Zolfo (S):** max. 0,03%
- **Ferro (Fe):** Stock residuo

Caratteristiche:

- **Durezza:** superiore all'AISI 410 a causa dell'elevato contenuto di carbonio.
- **Resistenza alla corrosione:** Moderata.
- **Magnetic:** Sì.

Applicazioni tipiche:

Utilizzato in aree dove sono richieste maggiore durezza e resistenza all'usura, come strumenti chirurgici, coltelli e utensili da taglio industriali.

AISI 304 Acciaio

Inossidabile

Composizione:


AISI 304 è un acciaio inossidabile austenitico, noto per la sua resistenza alla corrosione e versatilità, con la seguente composizione tipica:

- **Carbonio (C):** massimo 0,08%
- **Cromo (Cr):** 18% – 20%
- **Nichel (Ni):** 8% – 10,5%
- **Mangan (Mn):** Massimo 2%
- **Silizium (Si):** Max. 1 %
- **Fosforo (P):** massimo 0,045 %
- **Zolfo (S):** max. 0,03%
- **Ferro (Fe):** Stock residuo

Caratteristiche:

- **Durezza:** relativamente bassa rispetto agli acciai inossidabili martensitici.
- **Resistenza alla corrosione:** Eccellente; adatta a una vasta gamma di applicazioni.
- **Magnetico:** Di solito non magnetico.

3) Segni generali

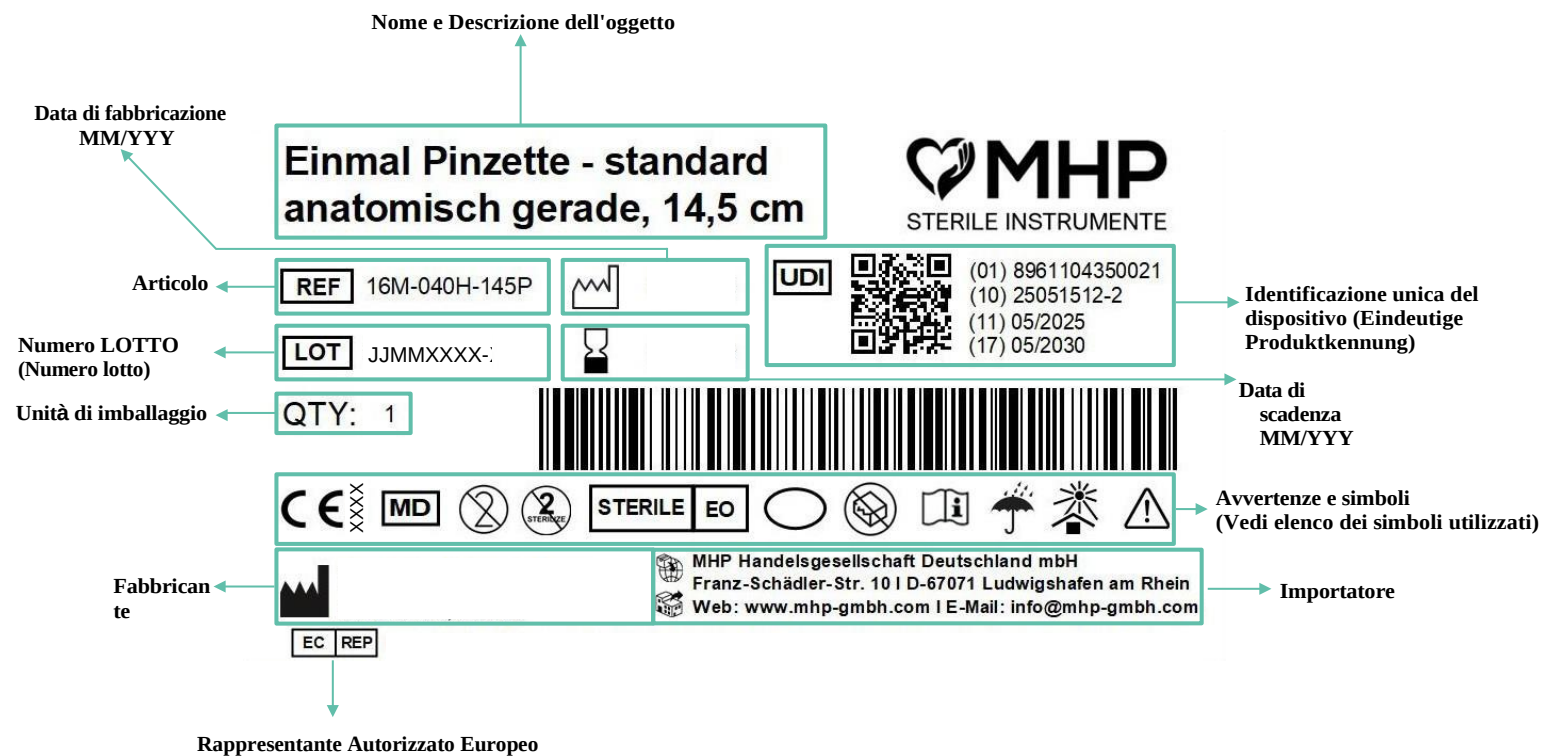

3.1 Numero del lotto e tracciabilità

XX	XX	XXXX	-	X
Jahr	Monat	Code der Produktionsstätte		Kontrollnummer

4) Istruzioni generali per l'uso

Scopo

Gli strumenti sterili MHP sono destinati a un uso singolo e vengono utilizzati per eseguire [ad esempio, procedure chirurgiche, diagnostiche o terapeutiche].

Utilizzato solo da professionisti qualificati in ambito medico.

Applicazioni

- Vedi le applicazioni nella scheda tecnica
- Adatto per applicazioni sterili
- Non adatti al riutilizzo o a interventi indesiderati

Avvertenze e precauzioni

- **Prodotto usa e getta:** Smalti immediatamente dopo l'uso.
Non riutilizzare.
- **Sterilità:** Usa il prodotto solo se la confezione è intatta e l'indicazione di sterilizzazione è corretta.
- **Conservazione:** conserva a temperatura ambiente, in un luogo asciutto, lontano dalla luce. Non conservare temperature inferiori a 0°C o superiori a 40°C.
- **Controlla prima dell'uso:** Controlla lo strumento per danni visibili o difetti del materiale. **I prodotti difettosi non devono essere utilizzati.**
- **Non danneggiare l'imballaggio:** Non aprire il packaging fino a poco prima dell'uso in condizioni asettiche.

Preparazione:

- Apri il packaging sterile in conformità con le regole dell'asepsi.
- Controlla l'integrità e la pulizia dello strumento.

Applicazione:

- Utilizzare lo strumento secondo specifiche esigenze chirurgiche e in conformità con gli standard medici.
- Evita pressioni improprie o stress eccessivo sullo strumento per evitare danni o rotture.

Dopo l'uso:

- Lo strumento non deve essere pulito, sterilizzato o riutilizzato dopo l'uso.
- Smaltire lo strumento in conformità con le normative locali sui rifiuti medici.

Disposizione

Il prodotto deve essere smaltito in conformità con le normative sui rifiuti medici usa e getta. Garantire una corretta separazione dagli altri rifiuti per evitare rischi per l'ambiente e il personale.

Disconoscimento

Il produttore/importatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni causati da un uso o riutilizzo improprio dello strumento.

Nota sulla segnalazione degli incidenti:

Gli incidenti gravi relativi a questo dispositivo medico devono essere segnalati al produttore e all'importatore nonché all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente risiede.

Contatto per notifiche:**Produttore:**

RB Strumenti Medici
S.I.E, Fateh Ghar, vicino alla città di Umer, 51310 Sialkot, PK

Plenipotenziario UE

CMC Dispositivi Medici e Farmaci
S.L Horacio Lengo 18
29006 Málaga,
info@cmcmedicaldevices.com
spagnolo
www.cmcmedicaldevices.com

Importatore

MHP-Handelsgesellschaft Deutschland mbH
Franz-Schädler-Str. 10 | 67071 Ludwigshafen am Rhein | Germania
beschwerde@mhp-gmbh.com
+49 (0) 621 54562793

5) Pinzetta

5.1 Pinzette anatomicamente dritte, standard

Descrizione generale del prodotto

Le pinzette usa e getta, anatomicamente dritte, standard sono uno strumento chirurgico preciso, ideale per un uso singolo in medicina. Consente una gestione precisa di tessuti o piccoli oggetti ed è adatta per applicazioni come la presa di oggetti estranei o la rimozione di cuciture.

Applicazioni

- Chirurgia generale:
Presa e tenuta precisa dei tessuti durante le procedure chirurgiche.
- Cura delle ferite:
Rimozione di suture cutanee, graffette o corpi estranei dalle ferite.
- Microchirurgia:
Maneggiamento fine di tessuti o strumenti durante procedure più piccole e precise.
- Medicina d'emergenza:
Utilizzo in operazioni di emergenza per una rimozione rapida e precisa dei tessuti o fissazione.
- Assistenza residenziale:
Utilizzato per la cura delle ferite e la cura post-operatoria delle procedure chirurgiche nel reparto.

Imballaggio

- Confezionato singolarmente sterile
- Scatola singola confezionata in un dispenser da 25 pezzi ciascuna

Prodotto

Dimensioni: 14,5 cm

Illustrazione



Materiale: AISI 410 (Acciaio Inossidabile Martensitico)

Superficie: finitura opaca

Marcatura: Identificazione visibile tramite fascio laser

Sterilizzazione: sterilizzazione EO

Punto n.: 16M-040-145P

5.2 Pinzette per denti chirurgici 1x2, standard

Descrizione generale del prodotto

Le pinzette chirurgiche con denti 1x2 sono uno strumento di alta qualità, ideale per procedure precise in medicina. Consente una presa e una tenuta sicura e precisa di tessuti o piccoli oggetti, specialmente in applicazioni come la posa o la rimozione dei punti di sutura, oltre che nella gestione dei tessuti in microchirurgia o cura delle ferite.

Applicazioni

- Chirurgia generale:
Presca e tenuta precisa dei tessuti durante le procedure chirurgiche.
- Cura delle ferite:
Rimozione di suture cutanee, graffette o corpi estranei dalle ferite.
- Microchirurgia:
Maneggiamento fine di tessuti o strumenti durante procedure più piccole e precise.
- Medicina d'emergenza:
Utilizzo in operazioni di emergenza per una rimozione rapida e precisa dei tessuti o fissazione.
- Assistenza residenziale: Utilizzata per la cura delle ferite e la cura post-operatoria delle procedure chirurgiche nel reparto.

Imballaggio

- Confezionato singolarmente sterile
- Scatola singola confezionata in un dispenser da 25 pezzi ciascuna

Prodotto

Dimensioni: 14,5 cm

Illustrazione



Materiale: AISI 410 (Acciaio Inossidabile Martensitico)

Superficie: finitura opaca

Marcatura: Identificazione visibile tramite fascio laser

Sterilizzazione: sterilizzazione EO

Punto n.: 16M-004-145P

5.3 Pinzette per denti chirurgici 1x2, standard secondo Adson

Descrizione generale del prodotto

Le pinze chirurgiche usa e getta con denti 1x2 secondo Adson sono caratterizzate dal loro design speciale, sviluppato per una fissazione sicura e precisa dei tessuti. Il tipo Adson è noto per la sua forma sottile ed ergonomica, i denti fini 1x2 offrono una presa salda, ideale per lavorare con tessuti delicati senza causare danni inutili. Confezionate in modo sterilizzato, queste pinzette sono perfette per un uso singolo in ambienti sterili.

Applicazioni

- Chirurgia generale:
Presa e tenuta precisa dei tessuti durante le procedure chirurgiche.
- Cura delle ferite:
Rimozione di suture cutanee, graffette o corpi estranei dalle ferite.
- Microchirurgia:
Maneggiamento fine di tessuti o strumenti durante procedure più piccole e precise.
- Medicina d'emergenza:
Utilizzo in operazioni di emergenza per una rimozione rapida e precisa dei tessuti
O fissazione.
- Assistenza residenziale: Utilizzata per la cura delle ferite e la cura post-operatoria delle procedure chirurgiche nel reparto.

Imballaggio

- Confezionato singolarmente sterile
- Scatola singola confezionata in un dispenser da 25 pezzi ciascuna

Prodotto

Dimensioni: 12 cm

Illustrazione



Materiale: AISI 410 (Acciaio Inossidabile Martensitico)

Superficie: finitura opaca

Marcatura: Identificazione visibile tramite fascio laser

Sterilizzazione: sterilizzazione EO

Punto n.: 16M-236H-120P

5.4 Pinzette anatomicamente dritte, standard secondo Adson

Descrizione generale del prodotto

Le pinzette usa e getta, anatomicamente dritte secondo Adson, sono uno strumento preciso da usare singola. Grazie al suo design anatomico e alla punta dritta, offre un controllo ottimale e una gestione delicata dei tessuti. La forma ergonomica, secondo Adson, garantisce una presa sicura e un uso confortevole, anche durante procedure più lunghe. Confezionate sterilizzatamente, le pinzette sono adatte a una vasta gamma di applicazioni mediche.

Applicazioni

- Chirurgia generale:
Presa e tenuta precisa dei tessuti durante le procedure chirurgiche.
- Cura delle ferite:
Rimozione di suture cutanee, graffette o corpi estranei dalle ferite.
- Microchirurgia:
Maneggiamento fine di tessuti o strumenti durante procedure più piccole e precise.
- Medicina d'emergenza:
Utilizzo in operazioni di emergenza per una rimozione rapida e precisa dei tessuti
O fissazione.
- Assistenza residenziale: Utilizzata per la cura delle ferite e la cura post-operatoria delle procedure chirurgiche nel reparto.

Imballaggio

- Confezionato singolarmente sterile
- Scatola singola confezionata in un dispenser da 25 pezzi ciascuna

Prodotto

Dimensioni: 12 cm

Illustrazione



Materiale: AISI 410 (Acciaio Inossidabile Martensitico)

Superficie: finitura opaca

Marcatura: Identificazione visibile tramite fascio laser

Sterilizzazione: sterilizzazione EO

Punto n.: 16M-050H-120P

5.5 Pinzette scheggiate secondo Feilchenfeld, standard

Descrizione generale del prodotto

Secondo Feilchenfeld, la pinzetta usa e getta è uno strumento appositamente sviluppato per uso singolo. Con le sue scheggiature fini e precise, è ideale per rimuovere schegge, corpi estranei o piccoli pezzi di tessuto. Il design sottile, secondo Feilchenfeld, garantisce un controllo ottimale e un lavoro preciso anche in luoghi difficili da raggiungere. Confezionato in modo sterilizzato, è ideale per un uso sicuro in ambito medico e infermieristico.

Applicazioni

- Chirurgia generale:

Rimozione precisa di corpi estranei e piccole parti di tessuto durante le procedure.

- Cura delle ferite:

Rimozione sicura di schegge, suture o oggetti estranei dalle ferite.

- Microchirurgia:

Maneggiamento fine di tessuti o strumenti durante procedure più piccole e precise.

- Medicina d'emergenza:

Uso efficiente in infortuni acuti per la rapida rimozione di corpi estranei.

- Assistenza residenziale:

Supporto nella cura post-operatoria e della ferita dei pazienti, specialmente nella rimozione di piccoli corpi estranei o residui tissutali.

Imballaggio

- Confezionato singolarmente sterile
- Scatola singola confezionata in un dispenser da 25 pezzi ciascuna

Prodotto

Dimensioni: 11,5 cm

Illustrazione



Materiale: AISI 410 (Acciaio Inossidabile Martensitico)

Superficie: finitura opaca

Marcatura: Identificazione visibile tramite fascio laser

Sterilizzazione: sterilizzazione EO

Punto n.: 16M-406H-115P

5.6 Pinzette DeBakey anatomicamente dritte, standard

Descrizione generale del prodotto

Le pinzette usa e getta DeBakey, anatomicamente dritte, sono uno strumento di alta qualità e monouso, progettato appositamente per applicazioni atraumatiche. La sua fine superficie di presa a coste garantisce che il tessuto venga tenuto saldo e delicato senza perderlo. La forma anatomica e dritta garantisce una gestione ergonomica e un controllo preciso, ideale per strutture tissutali delicate. Confezionato sterilizzatamente, è perfetto per l'uso in ambienti medici sterili.

Applicazioni

- Chirurgia generale:

Afferramento e trattenuta non traumatica dei tessuti durante le procedure chirurgiche.

- Cura delle ferite:

Lavoro preciso nella rimozione di residui di tessuto, suture o corpi estranei da ferite sensibili.

- Microchirurgia:

Maneggiamento fine di tessuti o strumenti durante procedure più piccole e precise.

- Medicina d'emergenza:

Uso rapido e sicuro in procedure acute che richiedono precisione atraumatica.

- Assistenza residenziale: supporto nell'assistenza post-operatoria e nella cura delle ferite, specialmente nel trattamento dei tessuti sensibili.

Imballaggio

- Confezionato singolarmente sterile
- Scatola singola confezionata in un dispenser da 25 pezzi ciascuna

Prodotto

Dimensioni: 15,5 cm

Illustrazione



Materiale: AISI 410 (Acciaio Inossidabile Martensitico)

Superficie: finitura opaca

Marcatura: Identificazione visibile tramite fascio laser

Sterilizzazione: sterilizzazione EO

Punto n.: 16M-040H-155P

5.7 Pinzette per denti chirurgici 1x2, standard, secondo Semken

Descrizione generale del prodotto

Le pinze chirurgiche usa e getta di Semken con denti 1x2 sono uno strumento preciso e versatile da usare singola. Il loro design distintivo Semken presenta una forma snella ed ergonomica che consente una maneggevolezza sicura e il massimo controllo. I denti fini 1x2 garantiscono una presa salda del tessuto senza esercitare pressioni inutili, rendendoli ideali per applicazioni sensibili. Confezionate in modo sterilizzato, le pinzette sono ideali per ambienti sterili per una vasta gamma di applicazioni mediche.

Applicazioni

- Chirurgia generale:
Stretta e fissazione precisa di pelle o tessuto durante interventi chirurgici, specialmente durante lavori fini.
- Cura delle ferite:
Rimuovere efficacemente punti di sutura, graffette o oggetti estranei dalle ferite senza danneggiare i tessuti.
- Microchirurgia:
Manipolazione precisa delle piccole strutture tissutali, supportata dalla forma sottile e controllata delle pinzette Semken.
- Medicina d'emergenza:
Rapida implementazione in procedure acute dove è necessario un lavoro preciso e sicuro.
- Assistenza residenziale:
Supporto nella cura post-operatoria e nella cura delle ferite dei pazienti chirurgici, specialmente quando si lavora con tessuti sensibili..

Imballaggio

- Confezionato singolarmente sterile
- Scatola singola confezionata in un dispenser da 25 pezzi ciascuna

Prodotto

Dimensioni: 13 cm

Illustrazione



Materiale: AISI 410 (Acciaio Inossidabile Martensitico)

Superficie: finitura opaca

Marcatura: Identificazione visibile tramite fascio laser

Sterilizzazione: sterilizzazione EO

Punto n.: 16M-005H-130P

5.8 Pinzette Jansen, baionetta, anatomiche, curve

Descrizione generale del prodotto

La pinzetta usa e getta Jansen, baionetta, anatomicamente curva, è uno strumento Specializzato per uso singolo. Il loro design unico, con forma a baionetta e piegatura anatomica, consente una maneggevolezza ottimale durante procedure che richiedono un controllo preciso e un migliore accesso alle aree difficili da raggiungere. La punta fine garantisce una presa sicura ai tessuti o agli oggetti piccoli senza danneggiarli. Confezionate in modo sterilizzato, queste pinzette sono ideali per l'uso in ambienti medici sterili.

Applicazioni

- Chirurgia generale:

Presa e fissazione efficace dei tessuti in aree difficili da raggiungere durante le procedure chirurgiche.

- Microchirurgia:

Manipolazione fine di piccole strutture tissutali e nervose durante procedure minimamente invasive, specialmente in aree profonde.

- Medicina d'emergenza:

Uso rapido e preciso in procedure acute dove è necessario un migliore accesso e Un lavoro controllato.

Imballaggio

- Confezionato singolarmente sterile
- Scatola singola confezionata in un dispenser da 25 pezzi ciascuna

Prodotto

Dimensioni: 16 cm

Illustrazione



Materiale: AISI 410 (Acciaio Inossidabile Martensitico)

Superficie: finitura opaca

Marcatura: Identificazione visibile tramite fascio laser

Sterilizzazione: sterilizzazione EO

Punto n.: 16M-003H-160P

6) Tosare

6.1 Forbici chirurgiche

Descrizione generale del prodotto

Le forbici chirurgiche, dritte con punta appuntita/smussata, sono uno strumento versatile per incisioni precise e preparazioni dei tessuti. La loro forma dritta e la combinazione speciale di lama appuntita e smussata offrono un controllo preciso e permettono sia un taglio preciso del tessuto sia un taglio sicuro di fili, cuciture o altri materiali. Queste forbici sono ideali per un uso singolo in ambienti sterili e offrono un alto livello di robustezza durante le procedure chirurgiche.

Applicazioni

- Chirurgia generale:

Taglio preciso di tessuto e suture durante interventi chirurgici.

- Cura delle ferite:

Taglio sicuro di fili, punti di sutura o graffette durante il trattamento della ferita.

- Medicina d'emergenza:

Uso rapido e sicuro in procedure acute per la cura delle ferite o per tagliare materiali.

- Assistenza residenziale:

Supporto nell'assistenza post-operatoria e nella cura delle ferite dei pazienti chirurgici, in particolare nella rimozione di cuciture o bende.


Imballaggio

- Confezionato singolarmente sterile
- Scatola singola confezionata in un dispenser da 25 pezzi ciascuna

Prodotto

Dimensioni: 14,5 cm

Illustrazione

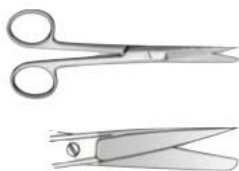

Materiale: AISI 420 (Acciaio Inossidabile Martensitico)

Superficie: finitura opaca

Marcatura: Identificazione visibile tramite fascio laser

Sterilizzazione: sterilizzazione EO

Punto n.: 15M-035H-145P

6.2 Forbici di Iris

Descrizione generale del prodotto

Le forbici usa e getta per iride, a punta appuntita, sono uno strumento ad alta precisione appositamente progettato per tagli fini e dettagliati. Con le loro lame strette e appuntite, le forbici permettono un lavoro preciso su piccole e delicate strutture tissutuali. È spesso utilizzata in microchirurgia, dove precisione e controllo sono di fondamentale importanza. Confezionate in modo sterilizzato, le forbici per l'iride sono ideali per un uso singolo in ambienti medici sterili.

Applicazioni

- Chirurgia generale:
Lavoro preciso su piccole aree di tessuto o pelle dove sono necessari tagli precisi.
- Microchirurgia:
Taglio preciso di tessuti, nervi o vasi sanguigni durante procedure minimamente invasive.
- Medicina d'emergenza:
Uso rapido in procedure acute dove è richiesta un'incisione fine e precisa.
- Chirurgia agli occhi:
Gestione precisa di piccole sezioni di tessuto durante procedure precise.


Imballaggio

- Confezionato singolarmente sterile
- Scatola singola confezionata in un dispenser da 25 pezzi ciascuna

Prodotto

Dimensioni: 11,5 cm

Illustrazione

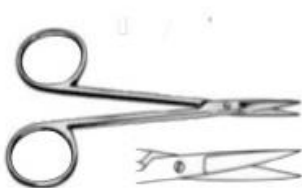

Materiale: AISI 420 (Acciaio Inossidabile Martensitico)

Superficie: finitura opaca

Marcatura: Identificazione visibile tramite fascio laser

Sterilizzazione: sterilizzazione EO

Punto n.: 15M-238H-115P

6.3 Forbici bendate Lister

Descrizione generale del prodotto

Le forbici Lister usa e getta sono uno strumento specializzato per uso singolo, progettato per il taglio preciso e sicuro di medicazioni, bende e materiali per ferite. Con la sua caratteristica forma di lama, dove una punta è smussata, le forbici permettono di tagliare il materiale in sicurezza senza danneggiare il tessuto sottostante. È particolarmente robusto ed è ideale per l'uso in emergenze e nella cura delle ferite. Confezionato in modo sterilizzato, offre un alto livello di sicurezza ed è indispensabile nelle strutture mediche.

Applicazioni

- Chirurgia generale:
Assiste nel trattamento delle ferite e nella rimozione delle medicazioni dopo un intervento chirurgico procedure.
- Cura delle ferite:
Taglio efficiente di medicazioni, bende e materiali per ferite nella cura delle ferite e trattamento.
- Emostasi:
Se necessario, le forbici vengono utilizzate in medicina d'urgenza per la rapida rimozione delle bende o Le medicazioni vengono usate per controllare il flusso sanguigno.
- Medicina d'emergenza:
Uso rapido in lesioni acute per rimuovere bende o bende senza rischi per il Per rimuovere il tessuto.
- Assistenza residenziale:
Ideale per la cura dei pazienti nel reparto, specialmente quando si rimuovono vecchie medicazioni e si cambiano le medicazioni.

Imballaggio

- Confezionato singolarmente sterile
- Scatola singola confezionata in un dispenser da 25 pezzi ciascuna

Prodotto

Dimensioni: 14 cm

Illustrazione



Materiale: AISI 420 (Acciaio Inossidabile Martensitico)

Superficie: finitura opaca

Marcatura: Identificazione visibile tramite fascio laser

Sterilizzazione: sterilizzazione EO

Punto n.: 15M-589H-140P

7) Portaaghi

7.1 Portaaghi Mayo Hegar

Descrizione generale del prodotto

Il portaago usa e getta Mayo-Hegar è uno strumento ad alta precisione progettato appositamente per uso singolo. Grazie al suo design robusto e alla punta finemente lavorata, il portaago è ideale per tenere e guidare aghi durante i punti chirurgici. Il design Mayo Hegar consente una maneggevolezza precisa e una cucitura controllata, mentre il manico antiscivolo garantisce una presa sicura. Confezionato sterilizzatamente, questo portaago è una scelta ideale per l'uso in ambienti medici sterili.

Applicazioni

- Chirurgia generale:
Manipolazione precisa di aghi e punti di sutura durante le procedure chirurgiche.
- Cura delle ferite:
Guida e mantenimento degli aghi durante la sutura di ferite o incisioni chirurgiche.
- Medicina d'emergenza:
Uso rapido per lesioni acute per una cura efficace delle suture delle ferite.
- Assistenza residenziale:
Supporto nella cura delle ferite e nella rimozione delle suture dei pazienti chirurgici durante il post-cura.


Imballaggio

- Confezionato singolarmente sterile
- Scatola singola confezionata in un dispenser da 25 pezzi ciascuna

Prodotto

Dimensioni: 12,5 cm

Illustrazione

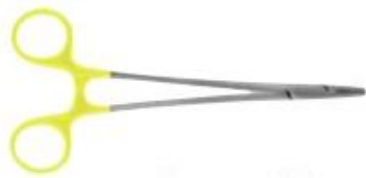

Materiale: AISI 410 (Acciaio Inossidabile Martensitico)

Superficie: finitura opaca

Marcatura: Identificazione visibile tramite fascio laser

Sterilizzazione: sterilizzazione EO

Articolo n.: 18M-001H-125P

8) Klemmen & Zangan

8.1 Pinza arteriosa secondo Rochester Pean

Descrizione generale del prodotto

La pinza per arteria usa e getta Rochester Pean è uno strumento robusto e preciso, progettato specificamente per un uso singolo. Con il suo design audace e le profonde scanalature antiscivolo sulle pinze, offre una presa sicura per comprimere o fissare vasi sanguigni, tessuti o organi durante le procedure chirurgiche.

La pinza per arteria Rochester Pean è ideale per l'uso in chirurgia vascolare, cure del sanguinamento o in altre aree dove è richiesta una clampa affidabile e precisa. Confezionato in modo sterilizzato, questo morsetto è adatto all'uso in ambienti medici non sterili.

Applicazioni

- Chirurgia generale:
Utilizzato per la fissazione temporanea di tessuti o organi durante interventi chirurgici.
- Chirurgia vascolare:
Compressione e fissaggio dei vasi sanguigni per controllare il sanguinamento durante l'intervento.
- Microchirurgia:
Clampaggio di piccoli vasi o strutture tissutali durante le procedure più precise e raffinate.
- Medicina d'emergenza:
Utilizzato nelle operazioni di emergenza per una rimozione o fissazione rapida e precisa dei tessuti.
- Assistenza residenziale:
Supporto nella cura post-operatoria e nella cura delle ferite dopo interventi chirurgici, specialmente per l'emostasi o la preparazione dei tessuti.

Imballaggio

- Confezionato singolarmente sterile
- Scatola singola confezionata in un dispenser da 25 pezzi ciascuna

Prodotto

Dimensioni: 14 cm

Illustrazione



Materiale: AISI 410 (Acciaio Inossidabile Martensitico)

Superficie: finitura opaca

Marcatura: Identificazione visibile tramite fascio laser

Sterilizzazione: sterilizzazione EO

Punto n.: 17M-073H-140P



8.2 Pinze per cereali secondo Pean Murphy

Descrizione generale del prodotto

Le pinze usa e getta Pean Murphy per cereali sono uno strumento specializzato progettato per uso singolo. Viene spesso utilizzata in chirurgia per afferrare e fissare in modo sicuro tessuti o organi. Le pinze si distinguono per la loro costruzione robusta e la superficie di presa precisa e antiscivolo, che garantisce una maneggevolezza sicura anche con tessuti sensibili. Confezionate sterilizzatamente, le pinze per cereali Pean Murphy sono ideali per l'uso in ambienti medici sterili.

Applicazioni

- Chirurgia generale:
Afferrare e fissare i tessuti durante interventi chirurgici, specialmente in quelli difficili o nelle zone basse.
- Cura delle ferite:
Fissazione temporanea del tessuto durante il trattamento della ferita o rimozione di Residui di tessuto.
- Microchirurgia:
Mantenimento preciso di strutture tissutali fini o organi durante procedure minimamente invasive.
- Medicina d'emergenza:
Utilizzato in procedure chirurgiche acute dove è necessaria una rimozione rapida e sicura di tessuto o tessuti. La fissazione dell'organo è necessaria
- Assistenza residenziale:
Supporto nella cura post-operatoria dei pazienti chirurgici, specialmente nel Cura della ferita o fissazione dei tessuti.

Imballaggio

- Confezionato singolarmente sterile
- Scatola singola confezionata in un dispenser da 25 pezzi ciascuna

Prodotto

Dimensioni: 20 cm

Illustrazione



Materiale: AISI 410 (Acciaio Inossidabile Martensitico)

Superficie: finitura opaca

Marcatura: Identificazione visibile tramite fascio laser

Sterilizzazione: sterilizzazione EO

Punto n.: 17M-335H-200P

9) Curette chirurgiche

9.1 Combinazione Volkmann Curette

Descrizione generale del prodotto

La curetta Volkmann usa e getta, combinata rotonda/ovale, è uno strumento preciso sviluppato appositamente per uso singolo. Con le sue due estremità di lavoro di forme diverse (rotonda e ovale), la curetta consente una rimozione precisa e delicata di tessuti, schegge ossee o altri materiali da ferite e cavità corporee. La forma ergonomica garantisce una maneggevolezza confortevole e un alto controllo, mentre i bordi affilati della curetta permettono un'estrazione efficace dei tessuti. Confezionato in modo sterilizzato, è ideale per l'uso in ambienti medici sterili.

Applicazioni

- Chirurgia generale:
Raschiamento di tessuto o schegge ossee durante le procedure chirurgiche.
- Cura delle ferite:
Pulizia e rimozione di materiale infettivo, tessuto morto o corpi estranei dalle ferite.
- Ginecologia:
Utilizzato per rimuovere residui di tessuto dopo aborto spontaneo o altre procedure ginecologiche.
- Assistenza residenziale:
Supporto nel controllo del paziente, in particolare nel trattamento delle ferite e nella rimozione dei tessuti per favorire la guarigione.

Imballaggio

- Confezionato singolarmente sterile
- Scatola singola confezionata in un dispenser da 25 pezzi ciascuna

Prodotto

Dimensioni: 16 cm

Illustrazione



Materiale: AISI 420 (Acciaio Inossidabile Martensitico)

Superficie: finitura opaca

Marcatura: Identificazione visibile tramite fascio laser

Sterilizzazione: sterilizzazione EO

Articolo n.: 26M-351H-160P



10) Cura delle ferite

10.1 Rimuovente

Descrizione generale del prodotto

Il rimuovente usa e getta è uno strumento specializzato per la rimozione sicura e precisa delle graffette dopo interventi chirurgici. Grazie al suo design facile da usare e al meccanismo di presa preciso, il rimuovente permette una rimozione facile e delicata delle graffette senza danneggiare il tessuto. La gestione ergonomica e i materiali robusti rendono questo strumento ideale per un uso singolo in ambienti medici sterili.

Applicazioni

- Chirurgia generale:
Applicazione per la rimozione delle graffette dalle ferite dopo interventi chirurgici.
- Cura delle ferite:
Rimozione sicura delle graffette cutanee dopo interventi chirurgici, per non danneggiare il tessuto danno.
- Dermatologia:
Rimozione delle graffette dopo un intervento chirurgico della pelle o dei tessuti molli per favorire la guarigione e la chiusura delle ferite.
- Medicina d'emergenza:
Rapido impiego per rimuovere le graffette da ferite o ferite trattate in situazioni di emergenza.
- Assistenza residenziale:
Supporto nel controllo del paziente, in particolare nel trattamento delle ferite e nella rimozione dei tessuti per favorire la guarigione.

Imballaggio

- Confezionato singolarmente sterile
- Scatola singola confezionata in un dispenser da 10 pezzi ciascuna

Prodotto

Dimensioni: 10 cm

Materiale: AISI 420 (Acciaio Inossidabile Martensitico)

Superficie: finitura opaca

Marcatura: Identificazione visibile tramite fascio laser

Sterilizzazione: sterilizzazione EO

Punto n.: 14M-17H-003P

11) Ulteriori informazioni

Organismo notificato:

SGS Belgio NV Ente
Notificato n. 1639
Noorderlaan 87
2030 Anversa, Belgio

Informazioni sul produttore:

RB Strumenti Medici
S.I.E, Fateh Ghar, vicino a Umer Town
51310 Sialkot, Pakistan
0092-333-8619610
www.rbmedikal.com

Plenipotenziario europeo:

CMC Dispositivi Medici e Farmaci S.L
Horacio Lengo 18
29006 Málaga,
info@cmcmedicaldevices.com
spagnolo
www.cmcmedicaldevices.com

Importatore / Distribuzione

MHP-Sterile Insutrumente

MHP-Handelsgesellschaft Deutschland mbH
Franz-Schädler-Str.10 - 67071 Ludwigshafen am Rhein, Germania

+ 49 (0) 621 545 627 93
info@mhp-gmbh.com
www.mhp-gmbh.com

Questo documento è di proprietà di MHP-Handelsgesellschaft Deutschland mbH.
Non sono permesse la divulgazione a terzi e la copia/duplicazione non autorizzata.