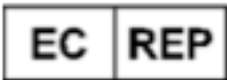


Symbol	Symbolname	Symbolbeschreibung
	Hersteller	Das Symbol zeigt den Hersteller der Medizinproduktes an
	Herstellungsdatum	Das Symbol zeigt das Datum an, an dem das Medizinprodukt fertig hergestellt wurde
	Importeur	Das Symbol zeigt das Unternehmen an, welches das Produkt einführt/ eingeführt hat
	Vertriebspartner	Das Symbol zeigt das Unternehmen an, welches das Produkt vertreibt
	Bevollmächtigter in der Europäischen union	Das Symbol zeigt den bevollmächtigten in der Europäischen Union an
	Medical Device	Das Symbol zeigt an, dass es sich um das Produkt um ein Medizinprodukt handelt
	Sterilisiert mit Ethylenoxid	Das Symbol zeigt an, dass das Medizinprodukt mit Ethylenoxid (EO-Gas) sterilisiert wurde
	Einfaches Sterilbarrieresystem	Das Symbol zeigt an, dass es sich hierbei um ein einfaches Sterilbarrieresystem handelt(durchgezogene Linie)

Symbol	Symbolname	Symbolbeschreibung
	Verwendbar bis	Das Symbol zeigt das Datum an, nachdem das Produkt nicht mehr verwendet werden darf
	Katalognummer (Artikelnummer/ Referenznummer)	Das Symbol zeigt die Artikelnummer an, sodass das Produkt eindeutig identifiziert werden kann
	CE-Kennzeichnung (mit notified Bodynummer)	Das Symbol gibt an, dass das Produkt der Richtlinie 93/42/ EWG & der Verordnung 2017/745 für Medizinprodukte entspricht, „XXXX“ gibt die Kennnummer der zuständigen Benannten Stelle an
	Unique Device Identification (Eindeutige Produktidentifizierung)	Zeigt einen Barcode, Strichcode & Nummern an, die einer eindeutigen Rückverfolgung und einer Produktidentifizierung dienen (01) EAN (GS1/HIBCC) (10) LOT-Nummer (11) Herstellungsdatum (17) Verfallsdatum
	Achtung	Das Symbol zeigt an, dass VORSICHT beim Umgang mit dem Produkt notwendig ist, durch die Anwender ist während dem Umgang mit dem Produkt Aufmerksamkeit zu leisten
	(Elektronische) Gebrauchsanweisung beachten	Das Symbol zeigt an, dass die Gebrauchsanweisung zu beachten ist

Symbol	Symbolname	Symbolbeschreibung
	LOT-Nummer (Chargennummer)	Das Symbol zeigt die Chargennummer des Herstellers an, womit eine Identifizierung des Produktes gewährleistet werden kann
	Nicht wiederverwenden	Das Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht wiederverwendet werden darf und zum einmaligen Gebrauch vorgesehen ist
	Nicht erneut sterilisieren	Das Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht wieder sterilisiert werden sollte
	Nicht verwenden wenn die Verpackung, Peelverpackung beschädigt ist	Das Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht verwendet werden sollte, wenn die Peelverpackung (Verpackung) beschädigt ist
	Von direktem Sonnenlicht schützen	Das Symbol zeigt an, dass das Produkt vor direkten Lichtquellen geschützt werden muss
	Vor Feuchtigkeit schützen, trocken Aufbewahren	Das Symbol zeigt an, dass das Produkt vor Feuchtigkeit geschützt werden muss